

MS3-MaxiDry100C

Soğutmalı Kuru Blok Isıtıcı İnkübatör

Kuru Blok Isıtıcı İnkübatör yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolüne sahiptir. Çeşitli numunelerin inkübasyonunda, korunmasında ve reaksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulama alanları arasında: farmasötik araştırmalar, molekül biyoloji çalışmaları, kimya, gıda güvenliği, çevre, kalite kontrol uygulamaları bulunmaktadır.

Kuru Blok Isıtıcı İnkübatör hızlı ısıtma ve soğutma hızına, eşit sıcaklık dağılımına, doğru sıcaklık kontrolüne, yüksek kararlılığa, düşük enerji tüketimine ve sessiz çalışma fonksiyonuna sahiptir.

Cihaz dahili sıcaklık sapması kalibrasyon fonksiyonuna, otomatik arıza tespit sistemine ve sesli alarm fonksiyonuna sahiptir.

Dahili aşırı sıcaklık koruma fonksiyonu sayesinde cihaz servis ömrü süresi uzamakta ve güvenli çalışma olanağı sağlamaktadır.

Kompakt tasarımı sayesinde cihaz az yer kaplar ve kullanımı kolaydır.


Opsiyonel olarak sürekli çalışma özelliğine sahiptir. Kolay değiştirilebilir, temizliği ve dezenfeksiyonu kolay çok sayıda blok seçeneği bulunmaktadır.

Kuru ısıtıcı blok inkübatör programlanabilme fonksiyonuna sahip olup, süresiz çalışma özelliğine sahiptir.

Özellikler	MS3-MaxiDry100C
Sıcaklık Kontrol Aralığı	-10°C / 100°C
Sıcaklık maksimum düşürme	Oda sıcaklığının 30°C altına
Sıcaklık ayar aralığı	-10°C /100°C
Dijital Zamanlayıcı Kontrol Aralığı	1dk-99sa59dk veya Devamlı
Sıcaklık stabilitesi (100°C'de)	± 0,5°C
Sıcaklık stabilitesi (40°C'de)	± 0,3°C
Sıcaklık blok uniformitesi	± 0,3°C
Sıcaklık gösterge hassasiyeti	0,1°C
Isıtma hızı	15dk (20°C'den 100°C'ye)
Soğutma hızı	30dk (Oda sıcaklığının 30°C altına) Oda sıcaklığı: 26°C
Blok Kapasitesi	1 Standart blok
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz
Güç	150W
Sigorta	250V, 3A , Ø5x20
Boyutlar, Gen.x Der.x Yük.	196x270x170 mm
Net ağırlık	3,5 kg



Opsiyonel Aksesuarlar, Bloklar

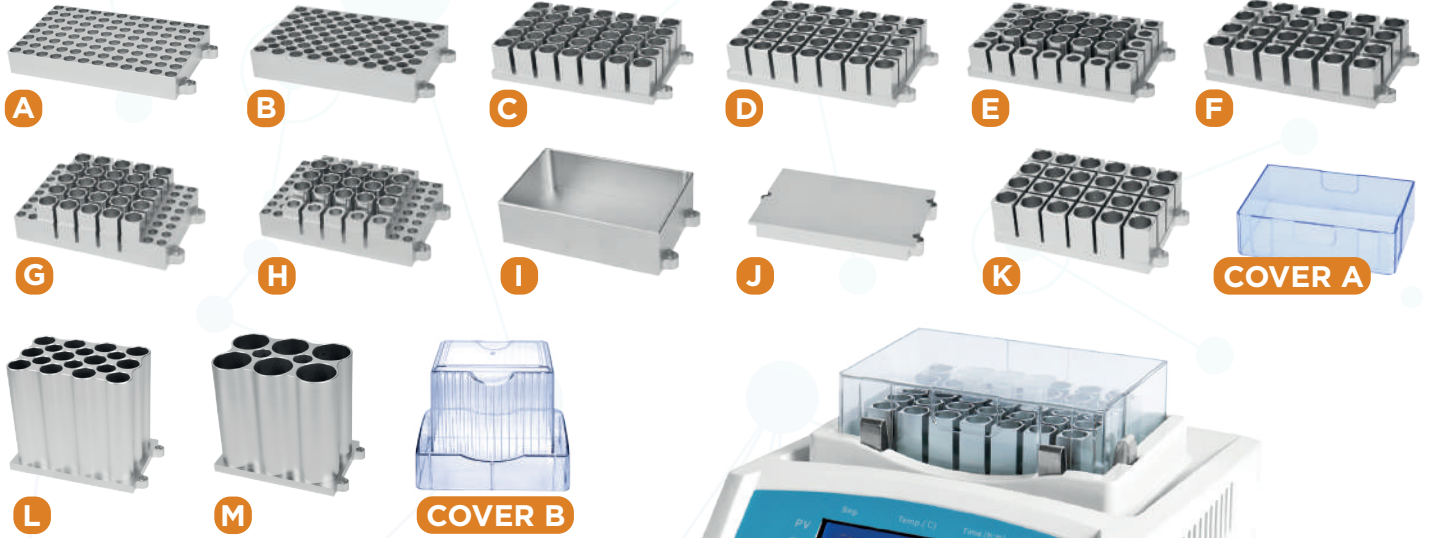

Aksesuarlar, blok parametreleri

Kod	Özellikler	Blok delik çapı	Delik alt şekli	Blok ölçüleri
A	0,2ml tüp x 96	6,7mm	Konik dip	107x71,5x20mm
B	0,5ml tüp x 54	8 mm	Konik dip	107x71,5x25mm
C	1,5ml tüp x 35	10,8 mm	Konik dip	107x71,5x32mm
D	2ml tüp x 35	10,8 mm	Yuvarlak dip	107x71,5x32mm
E	0,5ml tüp x 20 + 1,5ml tüp x 15	8 mm/ 10,8 mm	Konik dip	107x71,5x32mm
F	tüp çapı<12mm x 24	12mm	Düz dip	107x71,5x32mm
G	0,2ml tüp x 32 + 1,5ml tüp x 25	6,1 mm/ 10,8 mm	Konik dip	107x71,5x32mm
H	0,2ml tüp x 32 + 0,5ml tüp x 10 + 1,5ml tüp x 15	6,1 mm/ 8 mm/ 10,8 mm	Konik dip	107x71,5x32mm
I	Su Banyosu	103 x 67 x 30mm	Düz dip	107x71,5x32mm
J	Düz tabanlı plate'ler	Top size 69 x 107 x 12mm	Düz dipli plate	107x71,5x15mm
K	5ml tüp x 24	13,5 mm	Düz dip	107x71,5x32mm
L	15ml tüp x 12	16,9 mm	Düz dip	107x71,5x100mm
M	50ml tüp x 6	29,5 mm	Düz dip	107x71,5x100mm
COVER-A	Kullanılabilir bloklar: A-I and J	-	-	-
COVER-B	Kullanılabilir bloklar: J,K,L,M	-	-	-

Açıklama: K/L/M blokları standart blok değildir.