

## MS3-MaxiMix25 / Vorteks Karıştırıcı MS3-MaxiMix30D / Vorteks Karıştırıcı, Dijital

Vortex Mikser; yaşam bilimi, fiziksel ve kimyasal analiz alanında numune dokusu, hücre, bakteri sıvısı ve kimyasal reaktifin vibrasyonu, homojenleştirilmesi ve karıştırılması için kullanılır. 0.2-50ml arası farklı boyutlardaki mikro tüpler ve 15/50ml tüpler veya küçük laboratuvar kapları için uygundur.

Kompakt görünüm, güçlü çalışma fonksiyonu, cihaz altı darbeye dayanıklı tutucularla yüksek hızlı çalışma için idealdir.

Çoklu karıştırma modlar;, dokunmatik çalışma, sürekli çalışma ve zaman ayarlı (MS3-MaxiMix30D) çalışma seti bulunmaktadır.

Ayarlanabilir ve geniş hız aralığı, kararlı düşük hız, güçlü yüksek hız fonksiyonları bulunmaktadır.

Opsiyonel çeşitli tüplere uygun tutucu seçenekleri (Mikrotüpler, santrifüj tüpleri, mikrolakalar için uygundur)



MS3-MaxiMix25



MS3-MaxiMix30D

Özellikler	MS3-MaxiMix25	MS3-MaxiMix30D
Operasyon	Düğme + ölçek	Tuşlar + Dijital göstergeler
Çalkalama Orbit Uzunluğu	3mm	3mm
Çalkalama modu	Dairesel	Dairesel
Operasyon Modu	Devamlı yada dokununca çalışma	Devamlı çalışma yada kısa karıştırma
Hız Aralığı	0-2500rpm	300-3000rpm
Zaman Aralığı	-	1s-999min
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz	DC 24V
Güç	60W	30W
Siğorta	250V, 1A , Ø5x20	-
Boyutlar, Gen. X Derin. X Yük.	132x156x150 mm	132x156x150 mm
Net Ağırlık	2,5 kg	2,2 kg

## Opsiyonel aksesuarlar



MX-A



MX-B




MX-C



MX-D




MX-E

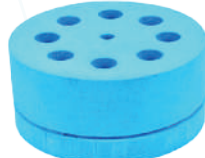


MX-F



MX-G

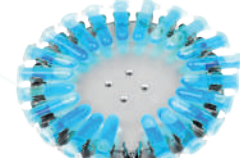

MX-H

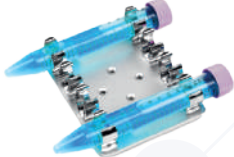

MX-I



MX-J



MX-K



MX-L



MIX-A



MIX-B



MIX-C



MX-P  
Standart platform



Kod	Açıklama
MX-A	Standart başlık. 30mm çapından küçük tüpler ve kaplar için uygundur
MX-P	Köpük tüp tutucuyu tutmak için standart platform
MX-B	Konveks ped. MX-P ile birlikte kullanıma uygundur. Çapı 99mm'den küçük tüpler ve kaplar için uygundur
MX-C	0.2ml tüpler için köpük tüp tutucu, 0,2ml tüp x 70 adet kapasiteli. MX-P ile kullanıma uygundur.
MX-D	0.5ml tüpler için köpük tüp tutucu, 0,5ml tüp x 36 adet kapasiteli. MX-P ile kullanıma uygundur.
MX-E	1.5/2 ml tüpler için köpük tüp tutucu, 1,5/2ml tüp x 20 adet kapasiteli. MX-P ile kullanıma uygundur.
MX-F	15ml tüpler için köpük tüp tutucu, 15ml tüp x 8 adet kapasiteli. MX-P ile kullanıma uygundur.
MX-G	50ml tüpler için köpük tüp tutucu, 50ml tüp x 4 adet kapasiteli. MX-P ile kullanıma uygundur.
MX-H	Tüp tutucu platform, 1,5/2ml tüp x 22 adet kapasiteli.
MX-I	Tüp tutucu platform, 15ml tüp x 4 adet kapasiteli.
MX-J	Tüp tutucu platform, 50ml tüp x 2 adet kapasiteli.
MX-K	Mikroplate tutucu platform, standart mikroplate'ler için uygundur.
MX-L	Universal platform, aşağıdaki tüp standartları için (MIX-A/B/C) ve standart mikroplate'ler için
MIX-A	96 x 0.2ml Tüp standı
MIX-B	24 x 0.5ml Tüp standı
MIX-C	24 x 1.5/2.0ml Tüp standı

MX-F ve MX-G aksesuarları kullanılırken cihaz hızı maksimum 900rpm olmalıdır.